


NO

Bruksanvisning

Stomibelte med lomme

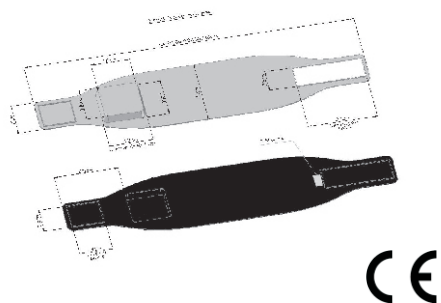

Belte skal brukes i samråd med helsepersonell.
Belte kan benyttes på begge sider.

Stomibelte m/lomme:

Stomibelte m/lomme tas på med lommen over stomipose og justeres med borrelåsen etter behov.

Belte anbefales for nyopererte, eller de som ikke kan ha så stort trykk mot stomiutstyret for eksempel pga. sykdom eller mulighet for tømning i forhold til trykket belte gir.


Vaskeanvisning:

Stomibelte med lomme kan vaskes på 40°C og drypp tørkes. Ved bading i klor eller saltvann skal den skylles godt. Under vask anbefales det at borrelås er montert sammen.

DK

Brugsanvisning

Stomibælte m/lomme

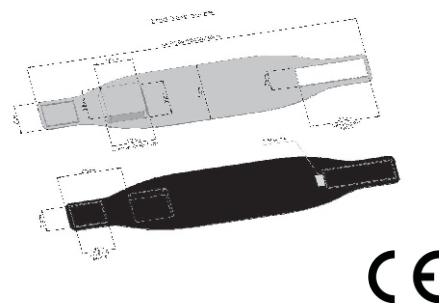

Bæltet skal bruges i samråd med læge
Bæltet kan bruges på begge sider.

Stomibælte m/lomme

Ved montering af stomibæltet anbringes lommen over stomiposen og justeres ved hjælp af velcrolåsen.

Bæltet anbefales for nyopererede eller folk som ikke tåler tryk mod stomiudstyret, for eksempel pga. sygdom eller mulighed for tømning i forhold til bæltets tryk.


Vaskeanvisning

Vaskes ved 40 grader. Undgå tørring i tørretumbler. Bæltet skylles grundigt efter badning i klor eller saltvand. Det anbefales at velcrolås er låst under vask.

SE

Bruksanvisning

Stomibälte med ficka

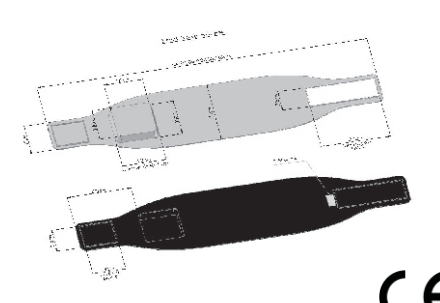

Detta bälte ska användas i samråd med
hälsopersonal.
Bältet kan användas på båda sidorna.

HH Stomibälte med ficka

Stomibältet sätts på med fickan över stomipåsen och justeras med kardborrelåset efter behov.

Stomibältet rekommenderas för nyopererade, eller för de som inte kan ha hårt tryck mot stomiutrustningen på grund av sjukdom eller möjlighet för läckage på grund av trycket på bältet.

Tvättråd

Tvättas i 40 grader Celsius och ska dropp torkas. Skölj väl efter bad i klor eller saltvatten. Kardborrlås ska vara låst vid tvätt.